

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

QuickStart – **EN**

Follow these instructions on how to set up your device for the first time.

Set the time on your device


1. Swipe left or right on this screen to match your local time.
2. Tap the screen to save your time setting.

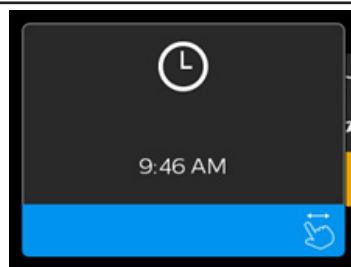

Set your MyStart Pressure


The MyStart comfort feature allows you to set your starting pressure.

1. Swipe left or right on this screen until you see your desired pressure setting.
2. Tap the screen to save your pressure setting.

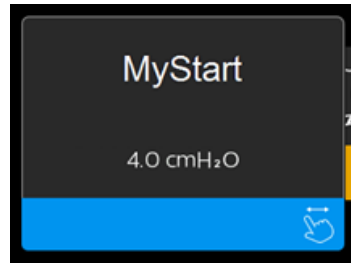

Refer to the My Comfort menu at any time to change your MyStart pressure setting.

Tips for Setting Your MyStart Pressure Setting from Your Current CPAP Settings

- If you use the Ramp feature () on your current CPAP, set your MyStart pressure to your Ramp starting pressure.
- If you do not use the Ramp feature on your current CPAP, set your MyStart pressure to your normal starting pressure.
- For more information on MyStart, refer to your user manual included with your DreamStation Go device.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Démarrage rapide – **FR**

Suivez ces instructions pour régler votre appareil avant la première utilisation.

Régler l'heure de votre appareil


1. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite de l'écran pour régler l'heure locale.
2. Touchez l'écran pour enregistrer le réglage de l'heure.

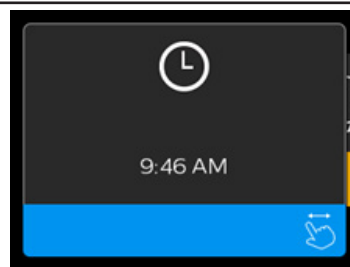

Régler la pression MyStart


La fonction de confort MyStart vous permet de régler la pression initiale.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la pression souhaitée s'affiche.
2. Touchez l'écran pour enregistrer le réglage de pression.

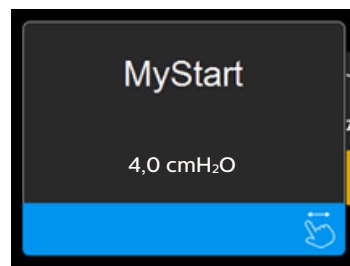

À tout moment, passez au menu Mon confort pour modifier le réglage de pression MyStart.

Conseils de paramétrage du réglage de pression MyStart dans vos réglages actuels de pression PPC

- Si vous utilisez la fonction de rampe () dans vos réglages actuels de pression PPC, réglez la pression MyStart selon la pression initiale de la rampe.
- Si vous n'utilisez pas la fonction de rampe dans vos réglages actuels de pression PPC, réglez la pression MyStart selon la pression initiale normale.
- Pour plus d'informations sur MyStart, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre appareil DreamStation Go.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Kurzanleitung – **DE**

Befolgen Sie diese Anweisungen bei der erstmaligen Einrichtung Ihres Geräts.

Stellen Sie die Uhrzeit auf Ihrem Gerät ein


1. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts oder links, um die Uhrzeit Ihrer Ortszeit anzupassen.
2. Tippen Sie zum Speichern der Zeiteinstellung auf den Bildschirm.

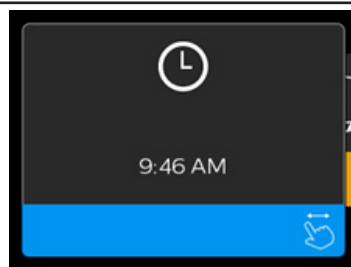

Einstellung Ihres MyStart-Drucks


Die MyStart-Komfortfunktion ermöglicht Ihnen die Einstellung Ihres Anfangsdrucks.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts oder links, bis Sie die gewünschte Druckeinstellung sehen.
2. Tippen Sie zum Speichern der Druckeinstellung auf den Bildschirm.

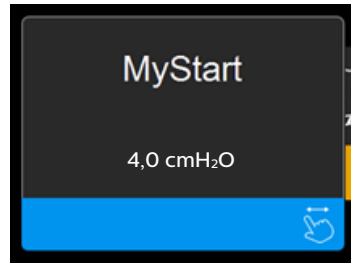

Die MyStart-Druckeinstellung kann jederzeit über das Menü „Mein Komfort“ geändert werden.

Tipps zur Einstellung der MyStart-Druckeinstellung ausgehend von den aktuellen CPAP-Einstellungen

- Wenn Sie die Rampenfunktion () auf Ihrem aktuellen CPAP verwenden, stellen Sie Ihren MyStart-Druck auf Ihren Rampen-Anfangsdruck ein.
- Wenn Sie die Rampenfunktion auf Ihrem aktuellen CPAP nicht verwenden, stellen Sie Ihren MyStart-Druck auf Ihren normalen Anfangsdruck ein.
- Weitere Informationen zu MyStart finden Sie im dem DreamStation Go-Gerät beiliegenden Benutzerhandbuch.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

QuickStart – **ES**

Siga estas instrucciones sobre cómo configurar por primera vez su dispositivo.

Ajustar la hora del dispositivo


1. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha en esta pantalla hasta que aparezca la hora de su zona.
2. Toque la pantalla para guardar el ajuste de la hora.

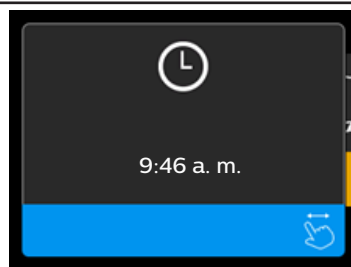

Ajustar la presión de MyStart


La función de comodidad de MyStart permite ajustar la presión inicial.

1. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha en esta pantalla hasta que aparezca el ajuste de presión deseado.
2. Toque la pantalla para guardar el ajuste de la presión.

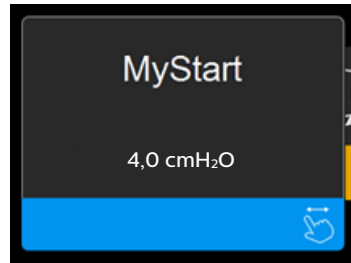

Consulte el menú Mi comodidad en cualquier momento para cambiar el ajuste de presión de MyStart.

Consejos para configurar el ajuste de presión de MyStart desde los ajustes actuales de CPAP

- Si se utiliza la función Rampa () en el CPAP actual, establezca la presión de MyStart en la presión inicial de Rampa.
- Si no se utiliza la función Rampa en el CPAP actual, establezca la presión de MyStart en la presión inicial habitual.
- Si desea ampliar información sobre MyStart, consulte el manual del usuario incluido con el dispositivo DreamStation Go.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Introdução Rápida – **PT**

Siga estas instruções para configurar o seu dispositivo pela primeira vez.

Acerte a hora no seu dispositivo


1. Deslize para a esquerda ou para a direita neste ecrã para acertar à sua hora local.
2. Toque no ecrã para guardar a sua definição de hora.

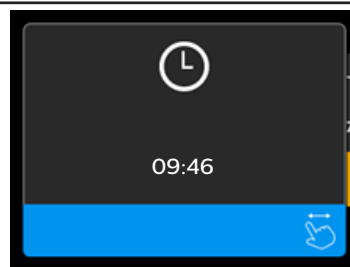

Defina a sua Pressão MyStart


A funcionalidade de conforto MyStart permite-lhe definir a sua pressão inicial.

1. Deslize para a esquerda ou para a direita neste ecrã até encontrar a definição de pressão pretendida.
2. Toque no ecrã para guardar a sua definição de pressão.

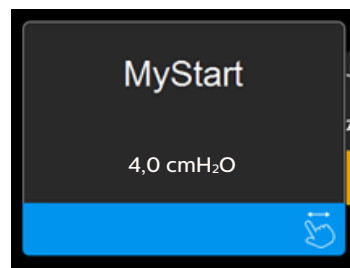

Consulte o menu O Meu Conforto a qualquer altura para alterar a sua definição de pressão MyStart.

Sugestões para Configurar a Sua Definição de Pressão MyStart a Partir das Suas Atuais Definições de CPAP

- Se utilizar a funcionalidade de Rampa () na sua CPAP atual, defina a sua pressão MyStart com o mesmo valor da pressão inicial de Rampa.
- Se não utilizar a funcionalidade de Rampa na sua CPAP atual, defina a sua pressão MyStart com o mesmo valor da pressão inicial normal.
- Para mais informações sobre o MyStart, consulte o manual do utilizador fornecido com o seu dispositivo DreamStation Go.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Início Rápido – **PT-BR**

Siga estas instruções sobre como configurar seu aparelho pela primeira vez.

Defina a hora no seu aparelho


1. Deslize para a esquerda ou direita no visor para igualar a hora exibida com a hora local.
2. Toque no visor para salvar as configurações de hora.

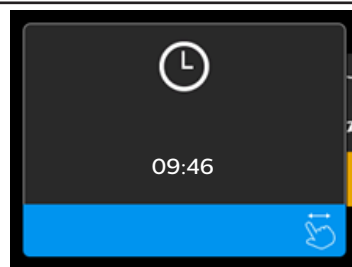

Configurar pressão do MyStart


O recurso de conforto MyStart permite que você configure sua pressão inicial.

1. Deslize para a esquerda ou direita no visor até visualizar a configuração de pressão desejada.
2. Toque no visor para salvar as configurações de pressão.

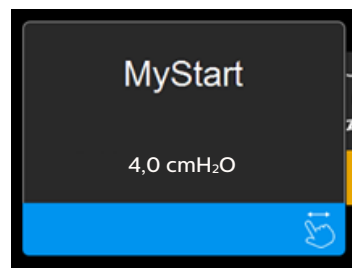

Consulte o menu Meu Conforto a qualquer momento para alterar as configurações de pressão do MyStart.

Dicas para definir as configurações de pressão do MyStart a partir das configurações de CPAP atuais

- Se você utilizar o recurso () da Rampa em seu CPAP atual, configure a pressão do MyStart para a pressão inicial da Rampa.
- Se você não utilizar o recurso da Rampa em seu CPAP atual, configure a pressão do MyStart para a pressão inicial normal.
- Para mais informações sobre o MyStart, consulte o manual do usuário incluído no aparelho DreamStation Go.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Lynstart – **DA**

Følg denne vejledning i, hvordan anordningen opsættes første gang.

Indstil tiden på anordningen


1. Stryg til højre på denne skærm for at matche den med din lokale tid.
2. Tryk på skærmen for at gemme din tidsindstilling.

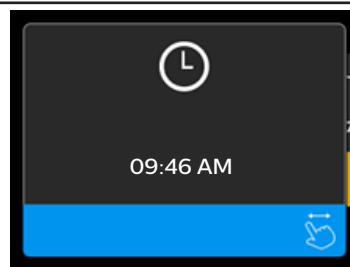

Indstil dit MyStart-tryk


MyStart-komfortfunktionen giver dig mulighed for at indstille dit startryk.

1. Stryg til højre på denne skærm, til du ser din ønskede trykindstilling.
2. Tryk på skærmen for at gemme din trykindstilling.

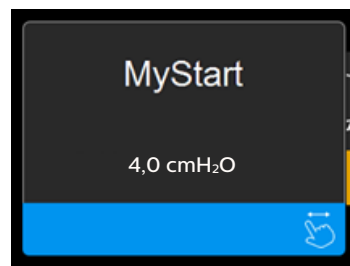

Se Min komfort-menuen når som helst for at ændre din MyStart-trykindstilling.

Tips til indstilling af din MyStart-trykindstilling fra dine nuværende CPAP-indstillinger

- Hvis du benytter Rampe-funktionen () på din nuværende CPAP, indstiller du dit MyStart-tryk til dit Rampe-startryk.
- Hvis du ikke benytter Rampe-funktionen på din nuværende CPAP, indstiller du dit MyStart-tryk til dit normale startryk.
- For yderligere oplysninger henvises til din brugervejledning, der følger med din DreamStation Go-anordning.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Snelstartgids – **NL**

Volg deze instructies over het voor de eerste keer instellen van uw apparaat.

Stel de tijd op uw apparaat in

1. Veeg naar links of rechts op dit scherm om uw plaatselijke tijd te vinden.
2. Tik op het scherm om de tijdsinstelling op te slaan.

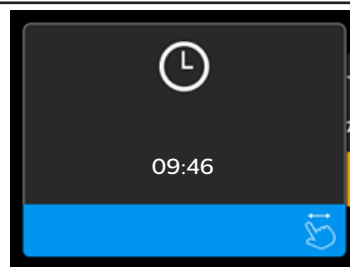


Stel uw MyStart-druk in


De MyStart-comfortfunctie biedt u de mogelijkheid om uw startdruk in te stellen.

1. Veeg naar links of rechts op dit scherm tot u uw gewenste drukinstelling heeft gevonden.
2. Tik op het scherm om de drukinstelling op te slaan.

U kunt wanneer u maar wilt naar het menu Mijn comfort gaan en uw MyStart-drukinstelling aanpassen.

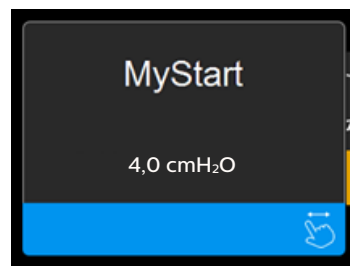

Tips voor het instellen van uw MyStart-druk op basis van uw huidige CPAP-instellingen

- Als u de ramp-functie () op uw huidige CPAP gebruikt, stel dan de MyStart-druk in op uw startdruk van de ramp-functie.
- Als u niet de ramp-functie op uw huidige CPAP gebruikt, stel dan de MyStart-druk in op uw normale startdruk.
- Voor meer informatie over MyStart raadpleegt u de gebruikershandleiding die is meegeleverd met uw DreamStation Go-apparaat.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Snabbstart – **SV**

Följ dessa anvisningar för att ställa in apparaten för första gången.

Ställ in tiden på apparaten

1. Svep åt höger eller vänster i denna skärm för att ställa in lokal tid.
2. Tryck på skärmen för att spara tidsinställningen.

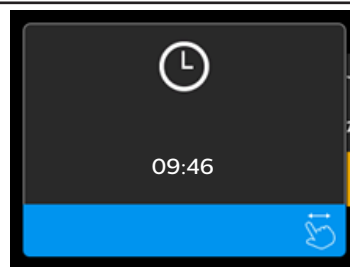


Ställ in MyStart-tryck


Med komfortfunktionen MyStart kan du ställa in startrycket.

1. Svep åt vänster eller höger på den här skärmen tills du ser önskad tryckinställning.
2. Tryck på skärmen för att spara tryckinställningen.

Du kan när som helst gå till Min komfort-menyn för att ändra tryckinställningen för MyStart.

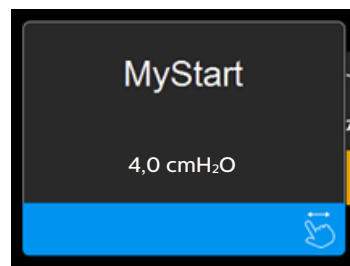

Tips för att ställa tryckinställningen för MyStart från befintliga CPAP-inställningar

- Om du använder Ramp-funktionen () med din befintliga CPAP, ställer du in MyStart-trycket till startrycket för Ramp-funktionen.
- Om du inte använder Ramp-funktionen med din befintliga CPAP, ställer du in MyStart-trycket till ditt normala startryck.
- Mer information om MyStart finns i användarhandboken som medföljer DreamStation Go.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Pika-aloitus – **FI**

Noudata näitä ohjeita, kun määrität laitteen asetukset ensimmäistä kertaa.

Aseta laitteen kello oikeaan aikaan


1. Aseta kello vastaamaan paikallista aikaa pyyhkäisemällä tätä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
2. Tallenna kellonajan asetus napauttamalla ruutua.

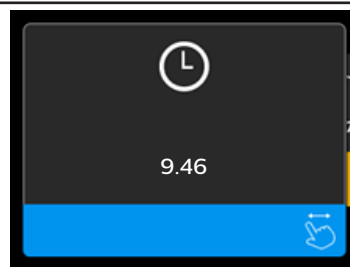

Määritä MyStart-paineesi


MyStart-mukavuustoiminto sallii oman aloituspaineen määrittämisen.

1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tällä näytöllä, kunnes näet haluamasi paineasetuksen.
2. Tallenna paineasetus napauttamalla ruutua.

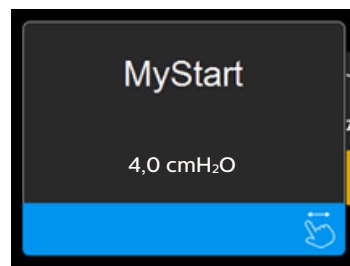

Voit koska tahansa muuttaa MyStart-paineasetusta Oma mukavuus -valikosta.

Vinkkejä MyStart-paineasetuksen määrittämiseen nykyisistä CPAP-asetuksista

- Jos käytät viiveaikatoimintoa () nykyisten CPAP-asetustesi kanssa, määritä MyStart-paine vastaamaan viiveajan aloituspainettasi.
- Jos et käytä viiveaikatoimintoa nykyisten CPAP-asetustesi kanssa, määritä MyStart-paine vastaamaan normaalia aloituspainettasi.
- Lisätietoja MyStart-toiminnosta on saatavana DreamStation Go -laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Hurtigstart – **NO**

Følg disse instruksjonene om hvordan du konfigurerer enheten for første gang.

Stille inn klokkeslettet på enheten.

1. Sveip mot venstre eller høyre i dette skjermbildet for å angi lokalt klokkeslett.
2. Trykk på skjermen for å lagre tidsinnstillingen.

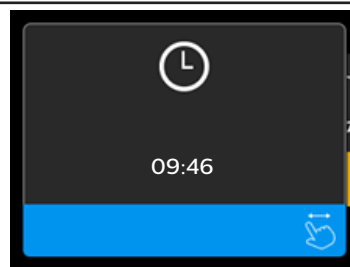


Angi MyStart-trykket


Med MyStart-komfortfunksjonen kan du angi starttrykket.

1. Sveip mot venstre eller høyre i dette skjermbildet til ønsket trykkinnstilling vises.
2. Trykk på skjermen for å lagre trykkinnstillingen.

Du kan når som helst gå til menyen Min komfort for å endre MyStart-trykkinnstillingen.

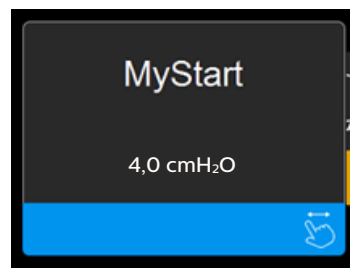

Tips for å angi MyStart-trykkinnstillingen basert på gjeldende CPAP-innstillinger

- Hvis du bruker rampefunksjonen () på den aktuelle CPAP-en, angir du MyStart-trykket til det samme som rampestarttrykket.
- Hvis du ikke bruker rampefunksjonen på CPAP-en, angir du MyStart-trykket til det samme som det normale starttrykket.
- Du finner mer informasjon om MyStart i brukerhåndboken som følger med DreamStation Go-enheten.

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

快速入门 - ZH-CN

首次设置设备时请遵循本说明进行操作。

在设备上设置时间

1. 向左或向右轻扫此屏幕，直至显示的时间与您的当地时间一致。
2. 点击屏幕以保存您的时间设置。

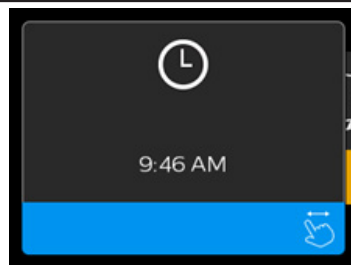


设置 MyStart 压力

您可以通过 MyStart 舒适功能设置起始压力。

1. 向左或向右轻扫此屏幕，直到您看到所需的压力设置。
2. 点击屏幕以保存您的压力设置。

可随时参考“我的舒适”菜单以更改您的 MyStart 压力设置。

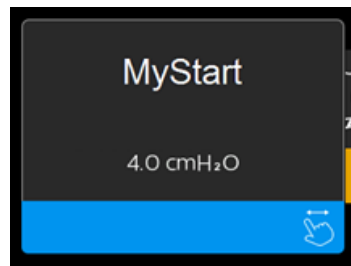

根据您当前的 CPAP 设置来设定 MyStart 压力

- 如果您对当前的 CPAP 使用延迟升压功能 (), 则会将 MyStart 压力设置为您的延迟升压起始压力。
- 如果您没有对当前的 CPAP 使用延迟升压功能, 则会将 MyStart 压力设置为您的正常起始压力。
- 有关 MyStart 的更多信息, 请参考 DreamStation Go 设备随附的用户手册。



Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA

Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 17
82211 Herrsching, Germany



1135312 R01
LZ 7/12/2017

© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.